


AC-2: Nuclear dense fine speckled型 (Speckled/斑紋型)

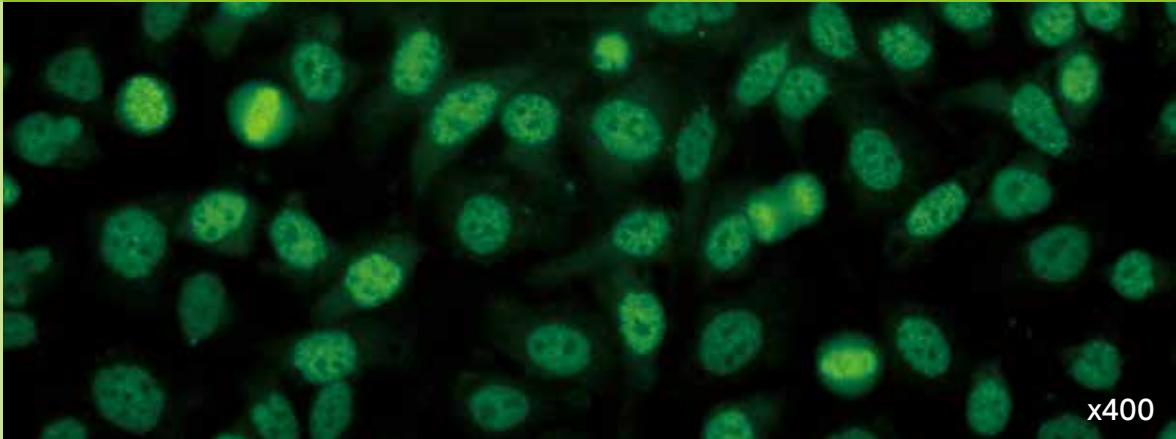

- 間期** 大きさ、輝度、分布が不均一な斑点状に染色される。際立った特徴として、斑点が密または疎に分布する領域が認められる
- 核小体** 陰性
- 分裂期** 分裂中期および終期の細胞は、染色体の強い斑紋型蛍光を示す

疑われる疾患

- 健常者
- 非膠原病患者

推奨フォローアップ検査

- 抗DFS70抗体

関連抗原

DFS70/LEDGF

メモ

抗DFS70抗体が認められ、他の一般的な抗ENA抗体が認められない場合、膠原病は否定される[2, 4]。
健常人および非膠原病患者において、AC-2型は抗DFS70抗体以外の自己抗体でも生じうる[1]。

参考文献

1. Ochs RL, Muro Y, Si Y, Ge H, Chan EK, Tan EM. Autoantibodies to DFS 70 kd/transcription coactivator p75 in atopic dermatitis and other conditions. *J Allergy Clin Immunol.* 2000;105(6 Pt 1):1211-20.
2. Watanabe A, Kodera M, Sugiura K, Usuda T, Tan EM, Takasaki Y, et al. Anti-DFS70 antibodies in 597 healthy hospital workers. *Arthritis Rheum.* 2004;50(3):892-900.
3. Mariz HA, Sato EI, Barbosa SH, Rodrigues SH, Dellavance A, Andrade LE. Pattern on the antinuclear antibody-HEp-2 test is a critical parameter for discriminating antinuclear antibody-positive healthy individuals and patients with autoimmune rheumatic diseases. *Arthritis Rheum.* 2011;63(1):191-200.
4. Mahler M, Parker T, Peebles CL, Andrade LE, Swart A, Carbone Y, et al. Anti-DFS70/LEDGF antibodies are more prevalent in healthy individuals compared to patients with systemic autoimmune rheumatic diseases. *J Rheumatol.* 2012;39(11):2104-10.
5. Chan EK, Damoiseaux J, Carballo OG, Conrad K, de Melo Cruvinel W, Francescantonio PL, et al. Report of the First International Consensus on Standardized Nomenclature of Antinuclear Antibody HEp-2 Cell Patterns 2014-2015. *Front Immunol.* 2015;6:412.
6. Ochs RL, Mahler M, Basu A, Rios-Colon L, Sanchez TW, Andrade LE, et al. The significance of autoantibodies to DFS70/LEDGFp75 in health and disease: integrating basic science with clinical understanding. *Clin Exp Med.* 2016;16(3):273-93.
7. Damoiseaux J, Andrade LEC, Carballo OG, Conrad K, Francescantonio PLC, Fritzler MJ, et al. Clinical relevance of HEp-2 indirect immunofluorescent patterns: the International Consensus on ANA patterns (ICAP) perspective. *Ann Rheum Dis.* 2019;78(7):879-89.